



Der Artikel SaHoMa®-II Filtermembrane mit Ventil-Set (Art.-Nr.: HM-213) enthält fünf Filtermembrane mit Löchern sowie ein Ventil-Set, wie abgebildet, bestehend aus jeweils zwei Ventilsitzen ② und Ventilringen ③:

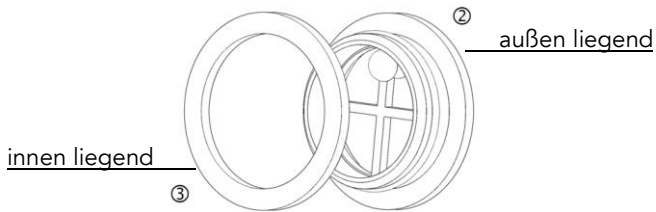

Das Ventil-Set ist als wiederverwendbares Stecksystem konzipiert und wird werkseitig an einer SaHoMa®-II Filtermembran angebracht. Es muss nach Verbrauch der SaHoMa®-II Filtermembran, wie im Folgenden beschrieben, davon gelöst und anschließend in die neue Filtermembran eingesetzt werden:

L  
Ö  
S  
E  
N

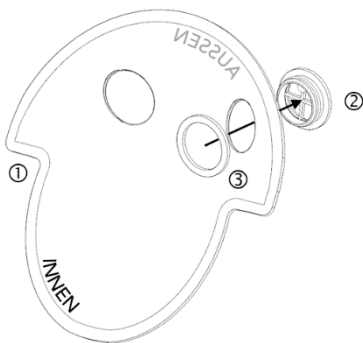


Schauen Sie sich vor dem Lösen der Ventile die SaHoMa®-II Filtermembran an und prägen Sie sich ein, wie das Ventil-Set in der Filtermembran sitzt.

### Lösen der Ventile durch Abziehen des Ventilrings

Zum Lösen der Ventile greifen Sie den Ventilring ③ auf der Innenseite der Filtermembran ① sitzend und lösen ihn, indem Sie ihn mit etwas vom Ventilsitz ② abziehen.

E  
I  
N  
S  
E  
T  
Z  
E  
N

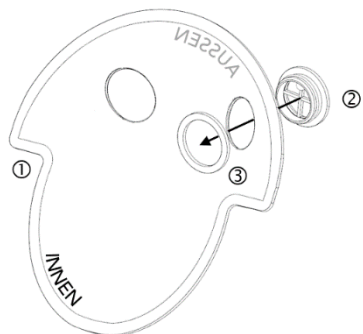


### Einsetzen der Ventile durch Aufstecken des Ventilrings

Zum Einsetzen der Ventile führen Sie den Ventilsitz ② auf der Außenseite der Filtermembran ① durch das dafür vorgesehene Loch und befestigen ihn, indem Sie den Ventilring ③ an der Innenseite der Filtermembran ① bis zum Anschlag auf den Ventilsitz ② drücken.


Zusammen mit der letzten, verbrauchten SaHoMa®-II Filtermembran können Sie auch das Ventil-Set entsorgen oder es alternativ als Ersatz aufbewahren.

The article SaHoMa®-II filter membrane with valve set (art.-no.: HM-213) contains five filter membranes with holes and a valve set, as shown in the picture below, consisting of two valve seats ② and two valve rings ③:

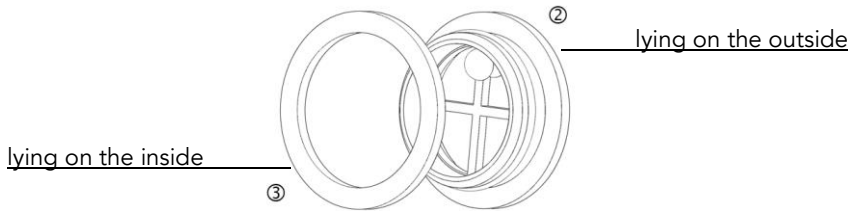

The valve set is designed as a reusable plug-in system and is attached to one SaHoMa®-II filter membrane by the manufacturer. It should be removed after consumption of the SaHoMa®-II filter membrane and then inserted into a new filter membrane as described below:

R  
E  
L  
E  
A  
S  
E

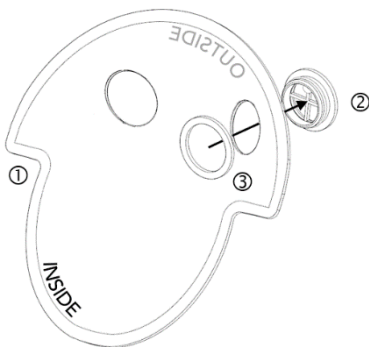


*Before releasing the valves, please have a look at the SaHoMa®-II filter membrane and memorize how the valve set sits in the filter membrane.*

### **Releasing the valves by pulling off the valve ring**

To release the valve, take the valve ring ③ sitting on the inside of the filter membrane ① and release it by pulling it slightly off the valve seat ②.

I  
N  
S  
E  
R  
T

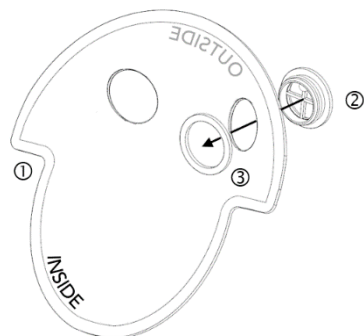

### **Inserting the valves by attaching the valve ring**

To insert the valves, put the valve seat ② on the outside of the filter membrane ① through the provided hole and secure it by pressing the valve ring ③ sitting on the inside of the filter membrane ① onto the valve seat ② all the way to the stop.

Together with the last used SaHoMa®-II filter membrane, you can also discard the valve set or alternatively store it for replacement.